



snapon
smile®

El provisional definitivo

OTBR
EXCLUSIVAS DENTALES
Único, como tu sonrisa



Fácil, eficiente, estético.
El provisional definitivo.



Muchos dentistas consideran soluciones temporales como uno de los aspectos más difíciles de la restauración dental.

Snap-On Smile® no es sólo un puente temporal, también proporciona una verdadera satisfacción funcional y estética a los pacientes.

Snap-On Smile® se adapta a los dientes originales y se sujeta con clips, sin adhesivo ni cemento. No hay impacto en las encías y no cubre el paladar, lo que induce un aspecto muy natural.

Para los pacientes que aún dudan en comprometerse con tratamientos restauradores definitivos, Snap-On Smile® les permitirá, mientras tanto, recuperar la comodidad y la sonrisa.

- ✓ SIN LA PREPARACIÓN DE LOS DIENTES NATURALES
- ✓ DVO* ENCONTRADO INMEDIATAMENTE (*dimensión vertical de la oclusión)
- ✓ MEJORÍA COSMÉTICA
- ✓ FASE DE ESPERA :
IMPLANTES, CHAPAS, ETC.
- ✓ ENGANCHADO A LOS DIENTES, SIN GANCHOS,
SIN SOPORTE DE TEJIDOS BLANDOS



*"Es fácil, indoloro
y realmente
muy conveniente."*

— Amanda V., paciente

Adecuado para los casos de implantología

La protección perfecta para sus zonas de implantación



ARCADA PARCIAL - 5 elementos o menos

Cuando Snap-It se usa como parte de una restauración de un implante, simultáneamente provee a los pacientes con:

- un reemplazo temporal funcional y estético de su diente,
- la protección de su zona de implante,
- y la posibilidad de planificar financieramente todo su tratamiento.

Mejora estética después de la colocación del implante

Una sonrisa intacta incluso durante la fase de cicatrización

ANTES



Caso clínico de
El Dr. Gary Radz
Denver, CO

APRÈS

97%

de los usuarios
¡Satisfecho!

Informe de los
médicos*

El 81% de los 31 profesionales evaluados dicen que integrarán a Snap-On Sonríe en su oficina.

Snap-On Smile® ha sido usado por profesionales evaluados par:

- restauración temporal,
- una mejora estética a corto plazo,
- una mejora estética a largo plazo,
- un establecimiento de diagnóstico.

*Informe de los clínicos, febrero de 2012 (Fundación independiente sin fines de lucro para la evaluación de productos)

"Presento principalmente el tratamiento dental cosmético tradicional, pero a menudo la situación económica de los pacientes hace que no estén dispuestos a comprometerse. Muchos eligen la sonrisa de Snap-On como una opción intermedia. Una vez que han experimentado una sonrisa funcional y atractiva, deciden ir por una solución permanente."

— Dr. Terri Alani - Houston, Texas



— Dr. David Little - San Antonio, Texas



"La restauración temporal es un momento difícil para los pacientes que tienen un tratamiento de implantología. No se van inmediatamente con una bonita sonrisa.. Imaginar la ausencia, incluso de un solo diente, para los pacientes es impensable. La solución ideal: usar Snap-On Smile®."

Una solución simple y asequible

¡Mantenga a sus pacientes sonriendo todo el tiempo!



ARCADA COMPLETA - 6 o más elementos

Snap-On Smile® es una excelente opción para la corrección de diástemas, dientes desalineados y descoloridos o el reemplazo de dientes perdidos.

Snap-On Smile® es la respuesta ideal para todos los pacientes que buscan una alternativa cómoda a dentaduras parciales y deseando una «sonrisa de Hollywood» sin el gasto y la incomodidad de procedimientos dentales complejos e invasivos.

Casos clínicos de Snap-On Smile®

¡Cualquiera sea tu caso!



ANTES



DESPUES

PUENTE COSMÉTICO REMOVIBLE



ANTES



DESPUES

MEJORÍA DE LA SONRISA



ANTES



DESPUES

AUMENTO INMEDIATO
DE LA DIMENSIÓN VERTICAL



ANTES



DESPUES

RESTAURACIÓN TEMPORAL
ANTES Y DESPUÉS DEL IMPLANTE



"Las estadísticas muestran que el 50% de la población no le gusta no su sonrisa, sino que se niega o es incapaz de invertir en las opciones de tratamiento de restauración permanente."

— Dr. Marc Liechtung - New York - inventor Snap-On Smile®

- ✓ Sistema de retención en los dientes naturales (sistema de clip)
- ✓ Hecho de resina acetálica cristalizada, altamente resistente a la compresión y al calor
- ✓ Flexible, se adapta perfectamente a los límites gingivales
- ✓ No mancha, no absorbe los pigmentos de los alimentos, bebidas y olores
- ✓ Plazo de 1 a 3 años
- ✓ 1 año de garantía
- ✓ Permite a los pacientes tener una buena higiene bucal


El diseño del Snap-On Smile®

Sin ganchos, sin cobertura palatina y sin adhesivo.

Resina acetálica cristalizada

El dispositivo Snap-On Smile® está fabricado de resina acetálica cristalizada. Este material es muy resistente y tiene una ligera flexibilidad.

Gracias a la durabilidad de esta resina especializada, el dispositivo Snap-On Smile® dura de 1 a 3 años y tal vez más con el cuidado adecuado.

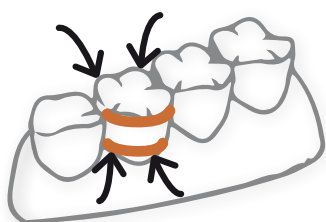

Los retenedores Snap-On Smile® se hacen en los dientes originales y no requieren ganchos, cobertura palatina o adhesivos.

Su elasticidad permite que el aparato gane retención al «flexionarse» en las alturas y contornos de los dientes existentes.

Su guía de colores Snap-On Smile®

Tonos disponibles para Snap-On Smile®

Se ha creado una guía de colores dedicada a Snap-On Smile® para una mejor cobertura dental personalizada.

Elija entre las 12 tonalidades el color de los dientes de sus pacientes para garantizar un resultado estético óptimo.

La sombra más clara disponible es S1.



Tintes ¹ Snap-On Smile®	Equivalencia ² Guía de cerámica
S1	OM1 / BL1
S2	OM2 / BL2
S3	OM3 / BL3
S4	AO-A1 / BL4
S5	A1
S6	A2
S7	A3.5 - A4
S9	B0 Opaque
S10	B2
S13	AB1
S17	D2
S20	3M1

¹ Tintes Snap-On Smile®


² Equivalencia de tonalidad : Guía dental VITA 3D-MASTER con guía de blanqueo

¿Cómo pedir tu Snap-On Smile® ?

Todos los pasos para usar Snap-On Smile®

1

Contáctenos en
XX.XX.XX.XX.XX
para recibir:

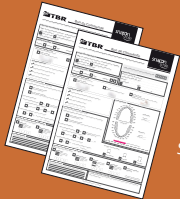

Formulario
de pedido de
Snap-On Smile®

2

Para cada uno de sus Snap-On Smile®,
complete su formulario de pedido
con los elementos necesarios (por
ejemplo, huellas dactilares, etc.) y devuelva
el juego a:



TBR GROUP
Service Snap-On Smile®
24, impasse René Couzinet
31 500 Toulouse - FRANCIA

3

Consigue tu
Snap-On Smile®.

¡Por fin devuelve una
sonrisa a tus pacientes!



Los suplementos esenciales de Snap-On Smile®

Una amplia gama de productos para su comodidad y la del paciente



Kit de ajuste y finalización



Accesorios
para los pacientes

- Kit de ajuste y finalización: kit especialmente concebido para retocar el Snap-On smile®, contactos oclusales y de pulido, etc.
- Accesorios para el paciente: gel antibacteriano, solución de limpieza, dispositivo desinfectante, etc.
- ¡Consúltenos para obtener más información!

Combo-Snap: el puente sin ganchos

- Puente de transición removible estético, sin ganchos.
- Indicado para pacientes desdentados bilaterales posteriores.
- ¡Consúltenos para obtener más información!



— Laboratorio
DenMat Italia
- Baronissi, Italie

Preguntas frecuentes sobre Snap-On Smile®

P: ¿Cuál es la diferencia entre una arcada completa Snap-On Smile® y una arcada parcial Snap-it?

R: Un arco completo toma en consideración 6 o más dientes (Snap-On smile®) y un arco parcial considera 5 dientes o menos. (Snap-it)

P: ¿Qué tonos están disponibles para un Snap-on-smile®?

R: Hay una guía de tonos dedicada con 19 tonos diferentes. El tono más claro disponible es el S1.

P: ¿Se pueden tratar los dientes desalineados con Snap-On-smile®?

R: Sí, jugando con el grosor de esta resina para alinear los dientes, siendo el grosor mínimo de 0,5 mm.

P: ¿Se puede usar el Snap-On Smile® inmediatamente después de la extracción y/o implantación?

R: Absolutamente. Sin embargo, es esencial notificar al laboratorio, antes de la extracción y/o implantación, la posición de los dientes en cuestión.

P: ¿Se puede colocar un puente en voladizo en un Snap-On-Smile®?

R: En el caso de un puente en voladizo, la extensión máxima es de 22 mm y se recomienda una silla para prótesis interdental para un apoyo adicional.

Los puentes Snap-On Smile® son fabricados por:



DENMAT ITALIA
di, Via S. Andrea, 73,
84081 Antessano SA, Italie
www.denmat.it

Snap-On Smile® está distribuido exclusivamente en:

Grupo TBR Av. De Francia, 19 Esc. C, piso 1º, pta. 2
46023 VALENCIA, España
+34 963 318 110 ✉ contacto@tbr.dental
www.tbr.dental